

Dispensador manual

1| El dispensador manual Digipette ofrece la solución más efectiva para ahorrar tiempo y agilizar las largas series repetitivas de pipeteo de líquidos ya que puede llegar a dispensar 49 volúmenes sin necesidad de recarga.

2| Todas sus características, dirigidas hacia una mayor comodidad y facilidad de manejo por parte del usuario, convierten al dispensador manual Digipette en un elemento esencial tanto en laboratorios de investigación como de rutina.

3| Presenta un diseño moderno y ergonómico que permite su manejo con una sola mano, evitando principalmente la fatiga de la muñeca y el pulgar. Además, su mecanismo de funcionamiento sigue el principio de desplazamiento directo. Esto permite dis-

pensar el volumen deseado con una gran precisión independientemente de las propiedades de viscosidad y fluidez del líquido, y sin contaminación de la pipeta garantizando la total seguridad del usuario y evitando posibles contaminaciones cruzadas de las muestras.

4| El dispensador manual puede acoplarse además a una amplia gama de puntas que le proporcionan una elevada flexibilidad de volúmenes. Las puntas no estériles, de uso único y fabricadas en material plástico de alta calidad están disponibles en 7 capacidades diferentes (0.5, 1.25, 2.5, 5.0, 12.5, 25 y 50 ml).



Referencia	Descripción
MGJ001	Dispensador manual


Tabla de precisión

Referencia	Rango de vol. μL	Exactitud %	Precisión
0,5 mL	10	± 0.9	$\leq 1.4 \leq 0.6$
1,25 ml	25	± 0.9	$\leq 0.8 \leq 0.3$
2,5 ml	50	± 0.8	$\leq 0.8 \leq 0.2$
5,0 ml	100	± 0.6	$\leq 0.6 \leq 0.2$
12,5 ml	250	± 0.4	$\leq 0.4 \leq 0.2$
25,0 ml	500	± 0.4	$\leq 0.4 \leq 0.2$
50,0 ml	1000	± 0.4	$\leq 0.4 \leq 0.15$

Pasos y gamas de volumen

Posición	1	2	3	4	5
Nº de pasos	49	24	15	11	9
Punta	Volumen dispensado				
0,5 ml	10	20	30	40	50
1,25 ml	25	50	75	100	125
2,5 ml	50	100	150	200	250
5,0 ml	100	200	300	400	500
12,5 ml	250	500	750	1000	1250
25,0 ml	500	1000	1500	2000	2500
12,5 ml	1000	2000	3000	4000	5000

Accesorios – Jeringas para pipetas de repetición (no incluidos)

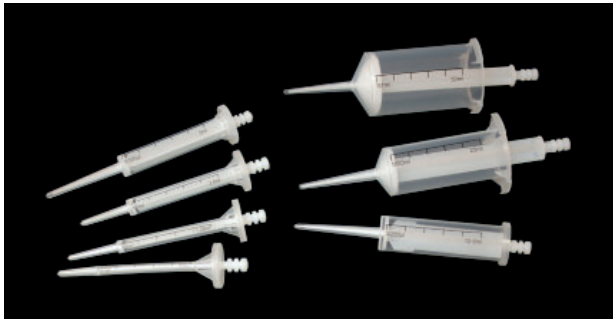

Referencia	Descripción
MJV017	Punta dispensador 0,5 ml
MJV018	Punta dispensador 1,25 ml
MJV019	Punta dispensador 2,5 ml
MJV020	Punta dispensador 5,0 ml
MJV021	Punta dispensador 12,5 ml
MJV022	Punta dispensador 25 ml
MJV023	Punta dispensador 50 ml
MJV024	Adaptador de puntas 25/50 ml