



# Autoclaves pour stérilisation Autester "ST DRY PV" 18 Classe B et "ST DRY PV" 23 Classe B



CAPACITÉS: "ST DRY PV 18": 18 LITRES. "ST DRY PV 23": 23 LITRES.

**Conforme aux directives: 2014/68/UE équipements à pression, 3.3.**

## CARACTÉRISTIQUES

- Chambre intérieure en acier inox.
- Purgé par vide fractionné.
- Séchage à vide. Générateur de vapeur externe.
- Réservoir d'eau pour alimenter la chaudière.
- Pénétration élevée sur produits poreux.
- Utile en stomatologie, ophtalmologie, salles d'opération, etc.
- Connexion USB pour mémorisation de paramètres dans l'ordinateur. Software inclus.
- Sortie pour imprimante.

## SÉCURITÉ


- Dispositif de blocage de porte.** En cas d'ouverture accidentelle de la porte.
- Valve de sécurité.** Pour que la pression ne dépasse pas la limite maximum.
- Thermostat de sécurité.** Débranche le chauffage en cas de température surélevée ou de manque d'eau dans le réservoir.
- Gaine de protection thermique du couvercle.**



**CONTROL DE TEMPERATURE ET CYCLE PAR. MICROPROCESSEUR AUTOMATIQUE.**

## PANNEAU DE COMMANDES

- Écran LCD
- Bouton d'augmentation de la valeur.
- Bouton de diminution de la valeur.
- Bouton de menu.
- Bouton Start-Stop.

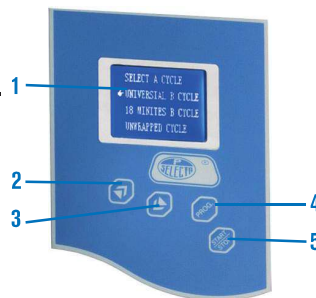

CYCLES	134 °C Urgence	134 °C Solide	134 °C Creux	134 °C Sanglant	121 °C Solide	121 °C Creux	134 °C Verre	121 °C Tampon	134 °C Bowie Dick	134 °C Hélix	134 °C Défini par l'utilisateur	Test Vide
Température stérilisation	134 °C	134 °C	134 °C	134 °C	121 °C	121 °C	134 °C	121 °C	134 °C	134 °C	134 °C	-
Pression de stérilisation	2,1 bar	2,1 bar	2,1 bar	2,1 bar	1,1 bar	1,1 bar	1,1 bar	1,1 bar	2,1 bar	2,1 bar	-	-
Nombre à vide	1	1	4	3	1	3	1	3	3	3	3	-
Temps de stérilisation	4 min.	4 min.	4 min.	18 min.	20 min.	20 min.	4 min.	30 min.	3,5 min.	3,5 min.	4 min.	-
Temps de séchage	8 min.	4 min.	10 min.	10 min.	8 min.	10 min.	4 min.	18 min.	3min.	3 min.	3 min.	-

MODÈLE	Code	Capacité litres	Ø / prof. cm		Extérieur cm			Étagères cm			Consom W	Poids kg
			Haut.	Larg.	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.		
AUTESTER ST DRY PV 18	4001734	18	24,5	38	40	47	56	2	20,5	28	1500	46,6
AUTESTER ST DRY PV 23	4001735	23	24,5	48	40	47	67	2	20,5	38	1700	48



Livré avec : 1 joint de rechange, clé d'ajustage de la porte, support à 3 étagères, pince d'extraction, filtre à eau de moulage et tube de sortie d'eau.

## ACCESSOIRES

- Imprimante à encre.** Papier de 2 1/4" (56 mm) de ample. Fourni avec câbles de communications et d'alimentation. Code **4120124**
- Distillateur d'eau spécial autoclave.** (Voir page 63).
- Machine à sceller** (Voir page 68 et 69).

