

El sistema de unión de elementos de vidrio se realiza mediante un sistema de unión esmerilada con rosca que permiten un gran número de aplicaciones. Este sistema permite realizar el mismo tipo de montajes con uniones esmeriladas cónicas clásicas pero totalmente aseguradas:

- 1 | Una mayor rigidez
- 2 | Una mayor fijación
- 3 | Una mayor estanqueidad
- 4 | Un uso más fácil: sin necesidad de utilizar grasa de silicona, y pinzas de aluminio o plástico así como limitando la necesidad de so-

portes.

5 | Una mayor seguridad: previniendo daños en los elementos de vidrio gracias a una mayor estabilidad.

Este sistema puede ser utilizado:

1. Para aplicaciones a vacío o presión
2. Con temperaturas de hasta 200°C

Los elementos en vidrio han sido fabricados en vidrio borosilicato 3.3 de muy elevada calidad, satisfaciendo a los sopladores de vidrio más exigentes.



**▶ ESMERILADO HEMBRA CON ROSCA**

Referencia	Esmerilado
TCB001	14/23
TCB002	19/26
TCB003	24/29
TCB004	29/32
TCB005	34/35
TCB006	45/40

**▶ ESMERILADO MACHO CON ANILLO DE BLOQUEO**

Referencia	Esmerilado
TCC001	14/23
TCC002	19/26
TCC003	24/29
TCC004	29/32
TCC005	34/35
TCC006	45/40




## ▶ ESMERILADO MACHO CON EXTENSIÓN Y ANILLO DE BLOQUEO

Referencia	Esmerilado
TCC011	34/35
TCC012	45/40

\*Otros esmerilados bajo demanda

## ▶ CÁPSULA A ROSCA

Referencia	Esmerilado
TCD003	14/23
TCD007	19/26
TCD011	24/29
TCD015	29/32
TCD019	34/35
TCD023	45/40

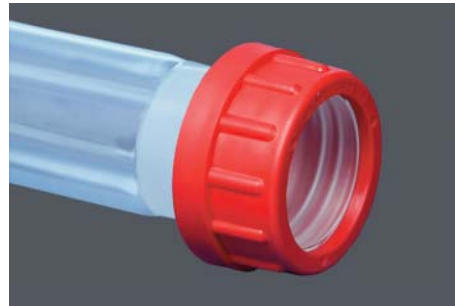

## ▶ ARANDELA DE BLOQUEO

Referencia	Esmerilado	Pack
TCD001	14/23	10 pcs
TCD005	19/26	10 pcs
TCD009	24/29	10 pcs
TCD013	29/32	10 pcs
TCD017	34/35	10 pcs
TCD021	45/40	10 cs



## ▶ JUNTA TÓRICA DE NITRILO

Referencia	Esmerilado	Pack
TCD002	14/23	10 pcs
TCD006	19/26	10 pcs
TCD010	24/29	10 pcs
TCD014	29/32	10 pcs
TCD018	34/35	10 pcs
TCD022	45/40	10 pcs



## ▶ JUEGO DE ACCESORIOS PARA UNIONES ESMERILADOS CON ROSCA

Cada juego de accesorios incluye:

- Cápsula de resina a rosca
- Arandela de bloqueo

- Junta tórica de nitrilo
- Para el esmerilado seleccionado

Referencia	Esmerilado	Pack
TCD004	14/23	10 pcs
TCD008	19/26	10 pcs
TCD012	24/29	10 pcs
TCD016	29/32	10 pcs
TCD020	34/35	10 pcs
TCD024	45/40	10 pcs