

EMBUDOS PARA ANÁLISIS

PP

Diseñados para todos los tipos de usos normales de laboratorio. Cuerpo con paredes inclinadas 60° y superficie acanalada, con dimensiones correspondientes a los diversos tipos de filtros, tanto normales como con pliegues. Autoclavables. **PRODUCTO IDÓNEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.**

Art.	Ø mm	Cap. ml	Long. vástago mm Stem length mm Compr. haste mm	Ø vástago mm Stem Ø mm Haste Ø mm	Tot. L mm
145	27	3,5	37	4	56,3
146	37	10	37	5	63,4
147	46	20	43	5	79
148	66	50	62	10	112
150	81	100	70	11	132

ANALYTICAL FUNNELS

PP

Designed specifically for analytical chemistry. Each size takes a standard size filter paper. Body of funnel is exact 60° angle. Provided with external and internal ribs. Autoclavable. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

Art.	Ø mm	Cap. ml	Long. vástago mm Stem length mm Compr. haste mm	Ø vástago mm Stem Ø mm Haste Ø mm	Tot. L mm
152	100	200	82	11	161,5
153	120	350	86	11	184
155	150	700	115	14	238
156	183	1250	140	14	293

FUNIS PARA ANÁLISES

PP

Elaborados para todos os usos normais utilizados em laboratório. Corpo com paredes inclinadas a 60° com ranhuras, com dimensões correspondentes aos diversos tipos de filtros, tanto filtros normais quanto os filtros dobrados. Autoclaváveis. **PRODUTO ADEQUADO AO CONTATO COM OS ALIMENTOS.**



EMBUDOS DE VÁSTAGO LARGO

PP

Cuerpo con un ángulo exacto de 60° y con superficie acanalada; el vástago largo se llena de líquido filtrado, creando debajo del filtro una depresión que hace más rápida la filtración. **PRODUCTO IDÓNEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.**

Art.	Ø mm	Cap. ml	Stem length mm	Stem Ø	Tot. L mm
162	65	50	150	8	194
164	78,5	100	143	8	206
165	103,5	225	145	8	194

LONG-STEM FUNNELS


PP

The 60° angles sides are provided with ribs for fast filtration and allow the use of standard size filter papers. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

FUNIS DE CANO LONGO

PP

Corpo em ângulo exato de 60°, com ranhuras. A haste longa é preenchida com o líquido filtrado, criando sob o filtro uma depressão que torna a filtração mais rápida. **PRODUTO ADEQUADO AO CONTATO COM OS ALIMENTOS.**

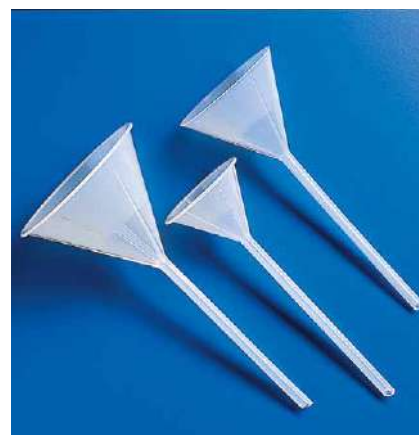

**BOMBAS PARA LÍQUIDOS
VISCOSOS**

PP

Bomba dosificadora de polipropileno, con accionamiento mediante palanca, que permite distribuir 22-23 litros por minuto. Distribución de aprox. 30 ml por accionamiento del pistón. Permite trasvasar líquidos muy viscosos (equivalentes a grasas SAE 90). Pistón vertedor orientable 360°. Dispone de tubo de aspiración.

Art.	Mod.	Cap. ml	Conexión roscada / Threading attach / Conexão de rosca
2004	MR60	± 300	2"

VISCOUS LIQUID PUMPS

PP

Dispensing pump made of PP operated by a unique lever-action stroke. Delivery of approximately 10 ounces (ab. 300 ml) per stroke, with capability of 6 gallons per minute (ab. 22-23 litres/min). Will handle the most viscous materials (equivalent to SAE 90 oil). Spigot orientation of 360° allows versatility in dispensing. Complete with shank.

**BOMBA PARA LÍQUIDOS
VISCOSOS**

PP

Bomba dispensadora de polipropileno com uma alavanca que permite o abastecimento de 22-23 litros/minuto. Vazão de aproximadamente 300 ml por ciclo. Pode ser utilizado para líquidos muito viscosos (equivalentes ao óleo SAE 90). O bico vertedor tem uma amplitude de movimento de 360°. Completa, com tubo de extração.

