



## Autoclaves électriques pour stérilisation "MICRO 8", "MED 12" et "MED 20"

RÉGULATION PAR PROSSOSTAT À 1 ET 2 BAR. POUR TEMPÉRATURES À 121 °C ET 134 °C.

MODELES VERTICAUX DE PAILLASSE "MICRO 8" CAPACITÉ : 8 LITRES. Y "MED 12" CAPACITÉ : 12 LITRES.

MODELE VERTICAL SUR LE SOL "MED 20" CAPACITÉ : 20 LITRES.

**Une alternative économique. Semi-automatique.**

### SÉCURITÉ:

**SOUPEPE DE SECURITE :** PREVIENT QUAND LA PRESSION DEPASSE LA LIMITE MAXIMALE.  
**PRESSOSTAT DE SECURITE :** DECONNECTE LES ELEMENTS CHAUFFANTS EN CAS DE DEPASSEMENT DE LA LIMITE DE PRESSION.  
**THERMOSTAT DE SECURITE :** CAS D'EXCES DE TEMPERATURE OU MANQUE D'EAU.  
**ENVELOPPE DE PROTECTION THERMIQUE DU COUVERCLE EN THERMO-PLASTIQUE MOULÉ.**

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Meuble extérieur et partie supérieure en acier inox, AISI 304.  
Réservoir et couvercle en acier inox, d'ouverture facile.  
Élément chauffant en acier inox, spécial INCOLOY de grande durée, résistant à la corrosion et à la haute température.  
Évacuation manuelle de l'air à la mise en marche. (seulement modèle MICRO 8).  
Purge atmosphérique automatique. (modèles "MED 12" et "MED 20").  
Fermeture simple et sûre, avec dispositif de sécurité de l'ouverture du couvercle.  
Interrupteur général de mise en marche.

### PANNEAU DE COMMANDE



1. Manomètre.
2. Indicateur lumineux d'alarme par surchauffe.
3. Indicateur lumineux de porte ouverte.
4. Indicateur lumineux de phase de stérilisation.
5. Indicateur lumineux de fin de cycle de stérilisation.
6. Sélecteur de température 121°C ou 134°C.
7. Indicateur lumineux à 121°C.
8. Indicateur lumineux à 134°C.
9. Minuterie de 0 à 60'.



### PARTIE ARRIÈRE

Câble d'alimentation électrique.  
Deux porte-fusibles.  
Thermostat de sécurité.

### PARTIE LATÉRALE.

Sortie d'écoulement.  
Soupape sélecteur de vapeur et drainage.



## Autoclave pour stérilisation "MICRO 8"

MODÈLE DE PAILLASSE.



### MODÈLE

Code	Capacité litres	Ø (utile) cm	Haut. cm	Haut./ Larg./ Prof. (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg
4001745	8	24	15	40 38 38	1000	13

Livré avec un panier en fil acier inox, de Ø 22 x 14 cm haut. Code, 1004771.



## Autoclave pour stérilisation "MED 12"

MODÈLE DE PAILLASSE.

Caractéristiques : Voir page 56.



### MODÈLE

Code	Capacité litres	Ø (utile) cm	Haut. (utile) cm	Haut./ Larg./ Prof. (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg
<b>4001756</b>	12	24	26	46 38 38	1800	18


Livré avec un panier en fil acier inox, de Ø 22 x 24 cm haut, Code, 1004772.



## Autoclave pour stérilisation "MED 20"

CONFORME AUX DIRECTIVES EN VIGUEUR DES APPAREILS À PRESSION.  
MODELE VERTICAL SUR LE SOL.

Caractéristiques : Voir page 56.

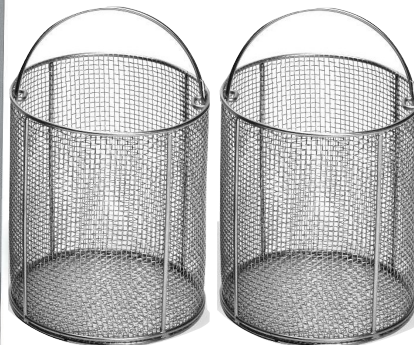

### MODÈLE

Code	Capacité litres	Ø (utile) cm	Haut. (utile) cm	Haut. / Larg./ Prof. (extérieur) cm	Consom. W	Poids Kg
<b>4001757</b>	20	24	41	70 38 38	2500	41

Livré avec deux paniers en fil acier inox, de Ø 23 x 17 cm haut, Code, 1004773.