




**VASO TINTORERO**  
En acero inox. AISI 304.  
Volumen: 500 ml.  
Código **6000291**

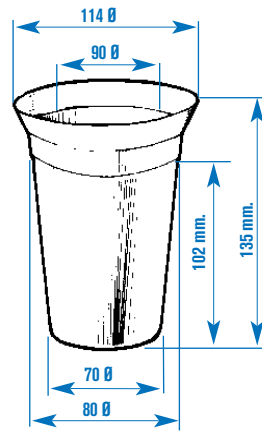

### CRISOLES

En acero inox. AISI 304

Código	Ø	Alto	Espesor	Volumen
<b>1098302</b>	30 mm.	32 mm.	2 mm.	20 ml.
<b>1098402</b>	40 mm.	42 mm.	2 mm.	45 ml.
<b>1009830</b>	30 mm.	32 mm.	0,6 mm.	20 ml.
<b>1009840</b>	40 mm.	42 mm.	0,6 mm.	45 ml.
<b>1009850</b>	50 mm.	55 mm.	0,8 mm.	85 ml.
<b>1009860</b>	60 mm.	65 mm.	0,8 mm.	140 ml.

En níquel puro Ni

Código	Ø	Alto	Espesor	Volumen
<b>1198302</b>	30 mm.	32 mm.	2 mm.	20 ml.
<b>1198402</b>	40 mm.	42 mm.	2 mm.	45 ml.
<b>1198502</b>	50 mm.	55 mm.	2 mm.	85 ml.
<b>1198602</b>	60 mm.	65 mm.	2 mm.	140 ml.
<b>1019830</b>	30 mm.	32 mm.	0,6 mm.	20 ml.
<b>1019840</b>	40 mm.	42 mm.	0,6 mm.	45 ml.
<b>1019850</b>	50 mm.	55 mm.	0,6 mm.	85 ml.
<b>1019860</b>	60 mm.	65 mm.	0,6 mm.	140 ml.

En zirconio Zr

Código	Ø	Alto	Espesor	Volumen
<b>1000563</b>	33 mm.	30 mm.	1 mm.	20 ml.
<b>1000564</b>	47 mm.	43 mm.	1 mm.	50 ml.
<b>1000565</b>	52 mm.	48 mm.	1 mm.	75 ml.
<b>1000566</b>	59 mm.	51 mm.	1 mm.	100 ml.

En vidrio de cuarzo

Código	Ø	Alto	Espesor	Volumen
<b>1000570</b>	45 mm.	36 mm.	1,5 mm.	38 ml.
<b>1000571</b>	50 mm.	40 mm.	2 mm.	49 ml.
<b>1000572</b>	60 mm.	48 mm.	2 mm.	90 ml.
<b>1000573</b>	35 mm.	44 mm.	1,5 mm.	24 ml.
<b>1000574</b>	40 mm.	50 mm.	1,5 mm.	40 ml.
<b>1000575</b>	50 mm.	62 mm.	2 mm.	75 ml.

En vidrio de cuarzo para incineración

Código	Ø	Alto	Espesor	Volumen
<b>1000576</b>	27 mm.	45 mm.	1,5 mm.	15 ml.
<b>1000577</b>	25 mm.	38 mm.	1,5 mm.	10 ml.

Tapas

Código
<b>6009730</b>
<b>6009740</b>
<b>6009730</b>
<b>6009740</b>
<b>6009750</b>
<b>6009760</b>

Tapas

Código
<b>6019730</b>
<b>6019740</b>
<b>6019750</b>
<b>6019760</b>
<b>6019730</b>
<b>6019740</b>
<b>6019750</b>
<b>6019760</b>

Tapas

Código
<b>6000567</b>
<b>6000568</b>
<b>6000569</b>
<b>6000570</b>

Tapas

Código
<b>1000620</b>
<b>1000621</b>
<b>1000622</b>
<b>1000623</b>
<b>1000624</b>
<b>1000625</b>

Tapas

Código
Incluida
Incluida

### ACERO INOX. AISI 304 - NÍQUEL PURO - ZIRCONIO - CUARZO

EL ACERO INOXIDABLE es utilizable a temperaturas desde -180 °C hasta +500 °C. Resistente al ácido nítrico, nitratos y permanganato potásico. Buena resistencia a las soluciones alcalinas concentradas. Resistencia media al ácido acético, sulfhídrico diluido, fosfórico poco concentrado, y soluciones de sulfitos, ácido bórico, ácidos orgánicos y bromuros.

EL NÍQUEL inalterable al aire e inoxidable hasta temperaturas de 500 °C. Buena resistencia a los álcalis fundidos y al agua de mar. Excelente comportamiento en presencia de cloro húmedo o clorhídrico gaseoso hasta 500 °C. Atacado lentamente por los ácidos orgánicos, clorhídrico y sulfúrico. Escasa resistencia al ácido nítrico diluido.

EL ZIRCONIO inalterable al aire y no contaminante, resistente hasta 550 °C en atmósfera oxidante y a 1500 °C en gas inerte (argón o azote), **reemplaza en muchos casos a los crisoles de platino** en todas las fusiones y en particular al peróxido de sodio y a los carbonatos. **Promedio de 100 fusiones por crisol**, lo que los hace muy económicos con referencia a los demás crisoles ya sea en porcelana, acero o níquel. Resiste a la mayor parte de disolventes alcalinos (Na, K, Li), carbonatos, hidróxidos, peróxidos, boratos, nitratos, cloruros y algunos fluoruros y al ácido sulfúrico hasta el 75% de concentrado. **El ácido fluorhídrico lo ataca.**

EL VIDRIO DE CUARZO tiene una temperatura de alta resistencia (de transición vítrea líquida 1130 °C), así como una baja expansión térmica. Se considera un material único para diversas aplicaciones científicas, debido a su pureza (sólo puede ser atacado por el ácido fosfórico y el ácido fluorhídrico caliente) y a las características térmicas. Además, el vidrio de cuarzo tiene propiedades ópticas extraordinarias a través de su transparencia espectral y su alta resistencia a la irradiación.